




Ileostomía

Primera Ayuda

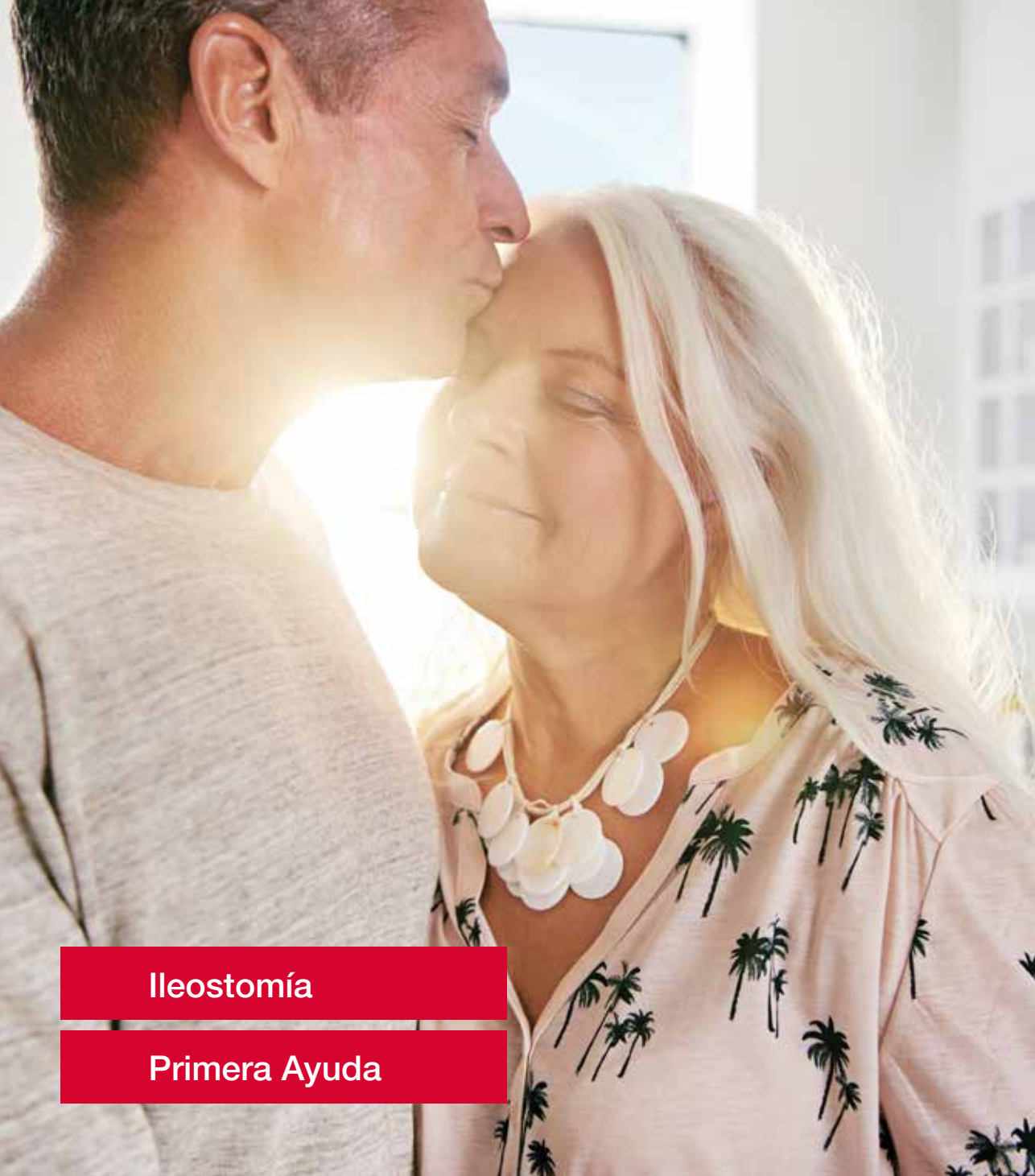

Ostomy Care

Piel Cuidada. Resultados Positivos



Contenidos

- 3** Una nueva situación
- 4** Anatomía del aparato digestivo
- 5** La higiene del estoma
- 6** Mi bolsa de ileostomía
- 7** Aplicación de bolsas de 1 pieza
- 8** Aplicación de bolsas de 2 piezas
- 9** Cómo abrir, vaciar y cerrar mi bolsa
- 10** Consejos para el cuidado del estoma
- 11** La alimentación en las ileostomías
- 13** Un día normal en su vida
- 15** Quimioterapia y radioterapia
- 15** Asociaciones

Esta guía le facilitará a usted y a su familia una información sencilla y práctica sobre los principales cuidados y hábitos que le recomendamos seguir cuando regrese a casa.

La información que aquí se recoge ha sido elaborada en base a la “universidad de la vida”: la experiencia de personas ostomizadas que han pasado por su misma situación, y también la de profesionales sanitarios que trabajan por su satisfactoria recuperación y calidad de vida.

Gracias a los miembros de la Asociación de Ostomizados de Madrid por su valiosa aportación en esta guía educativa.

Avalada por la Sociedad Española de Enfermería Experta en Estomaterapia.

Una nueva situación

Usted ha pasado por una cirugía en la que le han realizado una ileostomía.

Su enfermera le explicará que:


- Una ileostomía es la exteriorización de la última parte del intestino delgado a través del abdomen. Permite la salida de las heces.
- El estoma es la parte del intestino que vemos de color rojo en el abdomen, de textura suave y húmeda. Carece de terminaciones nerviosas y sensibilidad.
- Una persona ileostomizada no podrá controlar las heces como hasta ahora, por eso necesitará una bolsa que las recoja.
- La zona que rodea su estoma, se llama piel periestomal y es fundamental cuidarla, mantenerla limpia y protegida del contacto con las heces para evitar irritaciones.

Los primeros meses después de la operación son un momento de adaptación a una nueva situación, y puede tener la impresión de que todo gira en torno a su ileostomía. Poco a poco ganará confianza en sí mismo, su estoma dejará de ser el protagonista al mismo tiempo que usted se reincorporará gradualmente a su vida cotidiana.

Esperamos que los contenidos de esta guía respondan a las preguntas y situaciones que le surjan en la vuelta a su hogar después de la operación, y que le ayuden a retomar su día a día de forma gradual y positiva.

Anatomía del aparato digestivo

Pídale a su enfermera que le explique en el siguiente gráfico cómo es su aparato digestivo, cómo funciona, y dónde está situada su ileostomía.

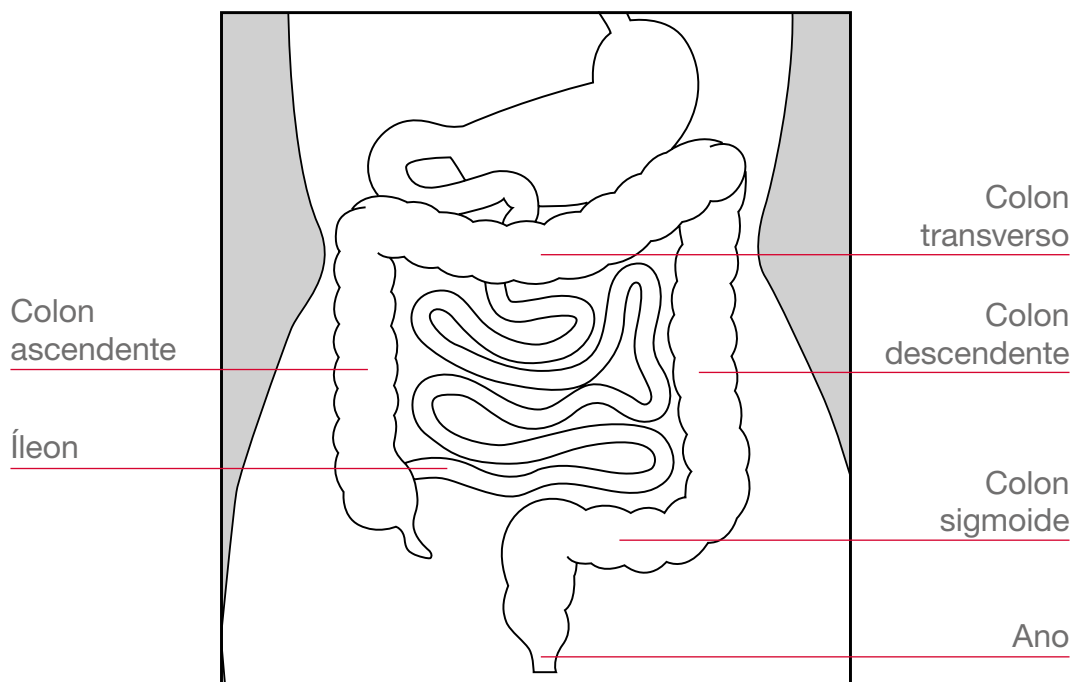

Notas

Higiene del estoma

Prepare antes el material necesario: bolsa para desechar la bolsa usada, esponja y papel para lavar/secar, agua tibia y jabón neutro, medidor de estoma, tijeras y nueva bolsa.



- Lave sus manos con agua y jabón.



- Retire la bolsa usada suavemente desde arriba hacia abajo. Sujete la piel para evitar tirones.



- Limpie suavemente su estoma con agua tibia y jabón neutro.



- Seque la piel y el estoma con una toalla de algodón, nunca con aire caliente.

CONSEJOS

- Humedezca la lámina para ayudar a despegar la lámina.
- Si se ducha sin bolsa, evite el agua caliente y la presión sobre el estoma.
- Si ve sangre en el estoma, presione con una esponja mojada en agua fría.
- Si necesita eliminar el vello de la zona, recórtelo con tijeras.
- No aplique ninguna crema que no le haya recomendado su enfermera.

Mi bolsa de ileostomía

Las personas portadoras de una ileostomía utilizan bolsas abiertas, tienen una abertura en la parte inferior para vaciar el contenido. Consulte en la página 9 cómo abrir, vaciar y cerrar su bolsa.

Además existen varios tipos, su enfermera le recomendará cual debe usar.

- **De 1 pieza:** la lámina y la bolsa están unidas. Se coloca todo de una sola vez sobre el abdomen. La bolsa se vacía cuando se encuentre a la mitad de su capacidad, y se cambia por otra nueva una vez al día.
- **De 2 piezas:** la lámina y la bolsa están separadas. Primero se pega la lámina al abdomen y luego se acopla la bolsa. La lámina se cambia cada 3 ó 4 días. La bolsa se vacía cuando se encuentre a la mitad de su capacidad, y se cambia por otra nueva una vez al día.

En el hospital utilizará bolsas transparentes pero en casa puede usar bolsas opacas, son más discretas. Además existen varios tamaños de bolsas, escoja el que mejor se adapte al volumen de las heces.

CONSEJOS

- En el hospital, pida a su médico/enfermera la primera receta, y así tener el material cuando regrese a casa.
- La farmacia no tiene el producto disponible inmediatamente, puede tardar unos días.
- Cuando adquiera su caja en la farmacia, solicite una nueva para el próximo mes y así tener el material siempre disponible.
- Para facilitar la elaboración de la receta en el Centro de Salud y su dispensación en la farmacia, lleve anotada la descripción del producto y su código nacional.

Aplicación de bolsas de 1 pieza



- Mida el tamaño del estoma.



- Dibuje con la plantilla la línea de recorte.



- Recorte la lámina con unas tijeras justo al tamaño del estoma.



- Retire el protector transparente de la lámina. Evite tocar en exceso el adhesivo con los dedos.



- Ajuste el orificio central de la lámina a la parte inferior del estoma y péguela de abajo hacia arriba.



- Dé calor a la lámina con las manos y tire de la bolsa para comprobar su perfecta sujeción a la piel.

Aplicación de bolsas de 2 piezas



- Mida el tamaño del estoma.



- Dibuje con la plantilla la línea de recorte.



- Recorte la lámina con unas tijeras justo al tamaño del estoma y retire el protector transparente.



- Ajuste el orificio central de la lámina a la parte inferior del estoma y péguela de abajo hacia arriba.



- Acople la bolsa en la lámina mediante el anillo flotante.



- Dé calor a la lámina con las manos y tire de la bolsa para comprobar su perfecta sujeción a la piel.

Cómo abrir, vaciar y cerrar mi bolsa



- Levante la pestaña y desenrolle el extremo inferior de la bolsa.



- Coloque los dedos entre las bandas flexibles y presione los laterales para vaciar.




- Puede vaciar la bolsa directamente en el inodoro.



- Limpie y seque el extremo inferior de la bolsa.



- Enrolle el extremo inferior de la bolsa tres veces hacia arriba y baje la pestaña transparente.

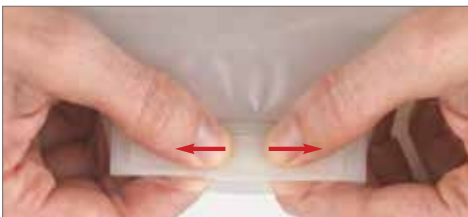

- Presione desde el centro hacia los extremos. Notará como los pequeños microcierres se acoplan entre sí.

Consejos para el cuidado del estoma



Mida el diámetro del estoma.

Durante los tres primeros meses tras la operación, mida semanalmente el tamaño del estoma ya que irá disminuyendo paulatinamente. En cada caja de dispositivos encontrará un medidor.



Aplique calor a la lámina.

Puede frotarla con las manos o ponerla en contacto con la piel (en el pecho o en la cinturilla del pantalón), nunca con secador de aire. Mejorará su adherencia antes de su aplicación.



Suavice los bordes de la lámina.

Cuando se recorta la lámina, es normal que queden bordes o picos que podrían irritar el estoma. Suavícelos con las yemas de los dedos.



Ajuste la lámina al estoma.

No deje espacios de piel visible entre el estoma y el adhesivo ya que la piel se irritaría ante el contacto con las heces. Recorte la lámina justo al tamaño del estoma sin llegar a estrangularlo.



Dé masaje circular a la lámina y abdomen.

Una vez ajustada, aplique movimientos circulares a la lámina, para mejorar su adherencia y evitar pliegues y arrugas. También puede presionar la lámina suavemente con la palma de la mano.



Eliminación de bolsas utilizadas.

Cuando se quite la bolsa usada, puede colocar una bolsa de desecho en la cintura de su pantalón o falda para no mancharse. Luego tírela a la basura.

Es fundamental que mantenga limpia la zona alrededor del estoma y protegida del contacto con las heces, ya que aparecerían molestias, irritaciones, picazón o dolor. En ese caso debe retirar la bolsa y la lámina, lavar la zona, secar, y colocar un nuevo dispositivo.

CONSEJOS

- Muchos estomas no son redondos, asegúrese de que la lámina se adapta y no deja piel expuesta.
- Puede colocarse delante de un espejo para medir el estoma y aplicar la nueva bolsa correctamente.
- Si aparecen las molestias, puede usar accesorios de barrera (pasta o anillos) para aislar la piel de las heces, o protector cutáneo en polvo para absorber humedades y regenerar la piel.

La alimentación en las ileostomías

Es posible que inmediatamente después de la cirugía deba seguir una dieta estricta. Para favorecer una cicatrización óptima y ayudarle a recuperar el peso que haya perdido antes o después de la operación, es fundamental implementar una dieta saludable. Una vez recuperado de la cirugía, debería poder reanudar su dieta habitual, a menos que se le indique lo contrario.

Olor

El olor es una preocupación para las personas que se someten a una cirugía de ileostomía. Las bolsas de ileostomía se elaboran con una película que funciona como barrera para el olor, de modo que el olor de las heces quede contenido dentro de la bolsa. Solo debería notarlo cuando está vaciando o cambiando la bolsa. Si nota olor en cualquier otro momento, verifique el sellado de la bolsa para detectar fugas.

Vacíe la bolsa cuando se haya llenado de materia fecal o gas en un tercio o la mitad de su capacidad. Para muchas personas con una ileostomía, eso es entre cuatro y seis veces por día. El mejor momento para cambiar su dispositivo es por la mañana, antes de comer o beber. Vaciar la bolsa periódicamente ayudará a reducir el riesgo de que haya una filtración. También ayudará a evitar el bulto que implica una bolsa demasiado llena. La dieta también puede afectar al olor de las heces.

Gases

Cuando su intestino comience a funcionar después de la cirugía, es posible que note que hay gas en la bolsa. La cantidad de gases varía. Si tenía muchos gases antes de la cirugía, lo más probable es que su experiencia sea parecida después de la cirugía.

Los gases pueden ser causados por los alimentos que consume. También tragar aire, beber bebidas gaseosas, fumar, masticar chicle o masticar con la boca abierta pueden aumentar la cantidad de aire que se traga.

El filtro de las bolsas de ostomía permite que los gases salgan de la bolsa. También evita que los gases se acumulen, de modo que la bolsa no se infle, y puede reducir el escape de olores.

Diarrea

En la ileostomía, es normal que la descarga no tenga consistencia. Si su descarga cambia y se vuelve principalmente líquida y hay un aumento marcado del volumen, puede ser que tenga diarrea. Si esto ocurre, debe beber más líquidos para prevenir una deshidratación. Mientras tanto, evite los alimentos y las bebidas que ablandan las heces. Si la diarrea persiste, consulte con el profesional de la salud.

ALIMENTOS	EFEECTO
Alubias, cerveza, brócoli, coles de bruselas, repollo, bebidas gaseosas, pepino, huevos, pescado, ajo cebolla y algunas especias	Aumentan los gases
Espárragos, brócoli, coles de bruselas, repollo, coliflor, huevos, pescado azul, ajo, cebolla y algunas especias	Aumentan el olor de las heces
Vegetales crudos, coco, maiz, frutos secos, la fruta seca, la cáscara de manzana, las palomitas de maiz	Se digieren de forma incompleta (aparecerán en la bolsa cáscaras o restos alimenticios)

CONSEJOS

- Mantenga una dieta equilibrada
- Coma lentamente y mastique bien los alimentos
- Beba a diario mucha agua, o zumo
- Poco a poco, agregue diferentes alimentos a su dieta, para ver cómo el sistema responde a esos alimentos

Medicación.

Las personas ileostomizadas pueden experimentar problemas en la absorción de medicamentos. Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para paliar posibles alteraciones.

CONSEJOS

- Los medicamentos líquidos se absorben mejor que los sólidos.
- Triture y disuelva en agua los comprimidos, excepto los recubiertos con azúcar.
- Los antibióticos pueden causar diarrea.
- Si toma anticonceptivos orales, estos pueden disminuir su efecto.
- No tome laxantes a no ser que ser su médico/enfermera se lo haya indicado.
- En función del tipo de fármaco, las heces podrían ver alterado su color, olor y consistencia.
- Recuérdele siempre a su médico/farmacéutico que tiene un estoma cuando le prescriban un nuevo medicamento.
- Consulte con su médico antes de tomar un medicamento.

Un día normal en su vida

Cuando regrese a casa después de la operación se preguntará cómo será su vida a partir de este momento. Su ileostomía no tiene por qué afectar a su vida cotidiana. Le recomendamos que se haga cargo de sus propios cuidados, comparta sus sentimientos, y vuelva a hacer su vida habitual.

Al principio notará el abdomen hinchado, utilice ropa amplia e intente pasear para restablecer la circulación y reducir esta incómoda sensación. Evite realizar esfuerzos físicos para prevenir la aparición de una hernia.

A continuación le damos algunos consejos que pueden resultarle de utilidad.

Cómo vestirse.

Puede seguir vistiendo como lo hacía antes de la operación, solamente evite las prendas que compriman en exceso el estoma.

- Puede colocar el dispositivo de ostomía por encima o por debajo de la ropa interior, lo que resulte más cómodo.
- Las mujeres pueden llevar medias y también faja.
- Los hombres pueden sustituir el cinturón de los pantalones por tirantes.
- Existe una gran variedad de estilos de trajes de baño para mujeres, escoja el que más le favorezca. Para los hombres, el boxer tiene una cintura elástica más alta.

Ocio y tiempo libre.

Es muy beneficioso para usted retomar las actividades con las que disfrutaba antes de la intervención.

La práctica de deporte no está contraindicada:

- Proteja el estoma con una faja si existe riesgo de lesión en el estoma. Evite disciplinas de contacto.
- Puede bañarse en la piscina y en la playa con la bolsa puesta. Incluso puede usar un tamaño de bolsa más pequeño.

Si antes de la operación le gustaba viajar, no deje de hacerlo ahora:

- Lleve siempre anotado el nombre, la referencia del producto que usa, y el nombre del fabricante para casos de necesidad.
- Use ropa cómoda fácil de quitar.
- Si viaja en avión, lleve sus productos en el equipaje de mano.
- Lleve el doble de material del que utiliza normalmente.
- No deje al sol sus bolsas y accesorios.
- Puede usar una bolsa de congelados para transportar sus bolsas en verano.
- En sus viajes, beba agua embotellada.

Quimioterapia y radioterapia

Puede ser que debido a su enfermedad necesite un tratamiento de quimioterapia o radioterapia.

- Fumar puede reducir el efecto de su tratamiento.
- Debe beber suficiente líquido.
- Notará un sabor metalizado en los alimentos.
- Consulte sobre su alimentación durante esta fase.
- El estoma puede cambiar de tamaño y forma durante las sesiones de tratamiento.
- La piel cambiará su pH, por lo que puede tener problemas a la hora de pegar la bolsa.
- Las heces pueden cambiar de consistencia, bien ocasionando diarrea o por el contrario estreñimiento.

Asociaciones

Si tiene cualquier duda o inquietud, puede ponerse en contacto con la Sociedad Española de Enfermería Experta en Estomaterapia, responderán a sus preguntas o le remitirán a un experto en ostomías cercano a su domicilio.

www.estomaterapia.es
estomaterapia@estomaterapia.es

También existen Asociaciones de Ostomizados, organizaciones sin ánimo de lucro donde podrá compartir su experiencia con personas que se encuentran en su misma situación y donde le ofrecerán ayuda y orientación sanitaria, psicológica, jurídica o social.

Hollister Ibérica S.A
Avda. de Bruselas 13, 2ºD
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 91 383 87 27
www.hollister.es



Tenga en cuenta que esta literatura es un complemento y no un reemplazo de la recomendación de su profesional sanitario.

Antes de su uso, asegúrese de leer las instrucciones de uso, para información relativa a Indicaciones de Uso, Contraindicaciones, Advertencias, Precauciones e Instrucciones.

El logotipo de Hollister y "Piel Cuidada. Resultados positivos." son marcas registradas de Hollister Incorporated.



© 2023 Hollister Incorporated. ESO025