

Anillo Plano 7805
ahora financiado
por el S.N.S.

El sellado que
necesitas

El envase que
buscas

Hollister Ostomía. **Los Detalles Importan.**

Anillo Plano 7805
ahora financiado
por el S.N.S.



Las opciones que necesitas,
los resultados que buscas.

Accesorios Hollister

Nueva presentación
Anillo Barrera Plano Adapt.

Reutilizable. Transparente. Apilable.

- >> Si sólo se necesita parte del anillo, conserva el resto para otra aplicación.
- >> Permite ver con facilidad el contenido.
- >> Optimiza espacio y transporta los anillos cómodamente.



Hollister Ostomía. **Los Detalles Importan.**



Los dispositivos médicos vendidos en la UE están marcados con

CE ó CE según corresponda.
0050

Hollister, su logotipo, Adapt y "Hollister Ostomía. Los detalles Importan."
son marcas registradas de Hollister Incorporated.

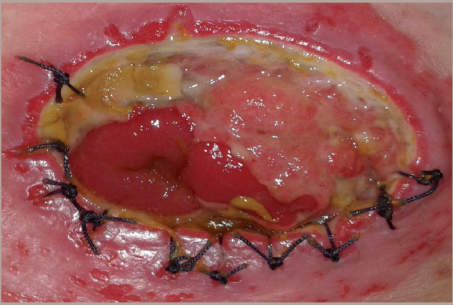
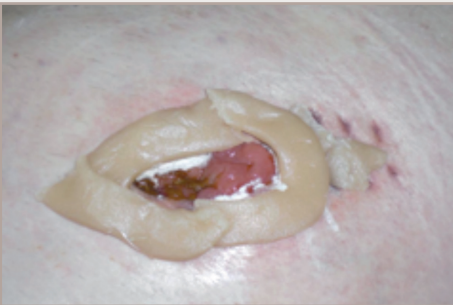
© Impreso en España. Abril 2014. ES0038



Hollister Ibérica,S.A.
Edificio América, Avda. de Bruselas nº13, 2ºD
28108 Alcobendas, Madrid
Tel: 913 83 87 27 / Fax: 917 66 92 01
www.hollister.com



Soluciones Adapt para complicaciones habituales

Situación	Accesorios utilizados	Método	Resultado
 ■ Dehiscencia	 Polvo Adapt  Anillo Barrera Plano Adapt	  Se aplica polvo sobre la dehiscencia y se cubre toda la zona con el anillo plano, dejando visible sólo el estoma.	
 ■ Estoma retraído y fístula	 Polvo Adapt  Anillo Barrera Plano Adapt  Pasta Adapt	  Se aplica polvo sobre la piel irritada, se cubre con el anillo plano y se rellena la fístula con pasta.	
 ■ Iritación periestomal	 Polvo Adapt  Anillo Barrera Plano Adapt	  Se aplica polvo sobre la piel irritada y se cubre la zona con el anillo plano.	
 ■ Fugas por estoma hundido	 Polvo Adapt  Anillo Barrera Plano Adapt  Anillo Barrera Convexo Adapt  Pasta Adapt	  Se aplica polvo sobre la piel irritada, se crea una superficie lisa con anillos planos y pasta, y se aplica un anillo convexo para ayudar a protruir el estoma (barajar uso lámina adhesiva convexa).	



Accesorios Adapt	Utilidad	Beneficio	C.N.	Ref.
Anillo Barrera Plano Adapt  Caja 10 uds	• Rellena superficies desiguales de la piel periestomal • Sella la piel periestomal frente a fugas de heces/orina	• Mejora el ajuste de la lámina adhesiva • Minimiza el riesgo de fugas • Protege la piel periestomal • Aumenta el tiempo de uso del dispositivo	ø 48mm: 494997 ø 98mm: 152807	7805 <i>¡Ahora financiado!</i> 7806*
Anillo Barrera Convexo Adapt  Caja 10 uds	• Proporciona una convexidad suave alrededor del estoma • Sella la piel periestomal frente a fugas de heces/orina	• Favorece la protrusión del estoma plano o retraído • Mejora el ajuste de la lámina adhesiva • Minimiza el riesgo de fugas • Protege la piel periestomal	ø 17-26mm: 497883 ø 27-36mm: 497891 ø 37-46mm: 497909	79520 79530 79540
Polvo Adapt  Bote 28 gr	• Absorbe la humedad de la piel periestomal dañada	• Protege y regenera la piel periestomal dañada	169581	7906*
Pasta Adapt 	• Rellena superficies desiguales	• Mejora el ajuste de la lámina adhesiva • Minimiza el riesgo de fugas	Tubo de 60gr (1 ud) 166934 Tubo de 14gr (20 uds) 234771	79300* 79301*
Desodorante-Lubrificador Adapt  Botella 236 ml	• Descompone el olor • Lubrica el interior de la bolsa	• Neutraliza los malos olores • Facilita el vaciado de la bolsa	159875	78500*
Spray Adhesivo  Botella 90 gr	• Aumenta la adhesividad de la lámina creando una película protectora	• Aumenta el tiempo de uso del dispositivo protegiendo la piel	346700	7730*
Spray Quita Adhesivo  Botella 76 gr	• Facilita la retirada de los dispositivos y residuos adhesivos	• Agiliza el cambio del dispositivo de ostomía • Evita irritaciones por eliminación de residuos	346718	7731*
Toallitas Quita Adhesivo  Caja 50 uds	• Facilita la retirada de los dispositivos y residuos adhesivos	• Agiliza el cambio del dispositivo de ostomía • Evita irritaciones por eliminación de residuos	226112	7760*
Toallitas Gel Dermoprotector  Caja 50 uds	• Crea una película protectora sobre la piel periestomal para prevenir irritaciones	• Previene irritaciones asociadas al cambio continuo de dispositivos	226111	7917*
Cinturón ajustable  Caja 1 ud	• Aporta seguridad en la fijación del dispositivo	• Proporciona una seguridad extra al usuario • Favorece la protrusión del estoma plano o retraído	434373	7300

Productos financiados por el S.N.S., excepto (*)